



BÁSCULAS CLÍNICAS DIGITALES CON VISOR A NIVEL DE LA VISTA

- Capacidad 600 lb x 0.2 lb / 300 kg x 0.1 kg
- Tallímetro con sonar sin contacto o mecánico en línea
- Plataforma plana extra ancha (17" de ancho x 17" de profundidad x 2.75" de altura)



Modelo APEX-SH

Modelo APEX

LECTURAS INSTANTÁNEAS DE PESO + ESTATURA SIN PRESIONAR UN SOLO BOTÓN

El tallímetro con sonar sin contacto en algunos modelos apex® proporciona lecturas digitales inmediatas para una velocidad, precisión e higiene óptimas.



DE MEDICIÓN
EFICIENTE
DE LOS PACIENTES
Y DE **DISEÑO**
ELEGANTE
ESTÁ AHORA DISPONIBLE!

TALLÍMETROS CON SONAR CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

El exclusivo tallímetro con sonar sin contacto de DETECTO detecta instantáneamente la estatura del paciente y mide a pacientes de prácticamente cualquier estatura. El tallímetro con sonar de apex mide desde 24 pulgadas (2 pies) hasta 86 pulgadas (7'2") en incrementos de 0.2 pulgadas y con lecturas métricas desde 60 cm hasta 218 cm con incrementos de 0.5 cm (modelo APEX-SH). Simplemente párese sobre la báscula y su estatura será capturada y mostrada en el LCD dentro de un segundo.




Las básculas apex® fabricadas en EE. UU. por DETECTO miden en forma eficiente el peso y la estatura de pacientes de todas las edades y medidas.

Los modelos apex con tallímetro mecánico en línea miden desde 24 pulgadas (2 pies) hasta 86 pulgadas (7'2") en incrementos de 0.125 pulgadas y con lecturas métricas desde 60 cm hasta 218 cm con incrementos de 1 mm (modelo APEX). Para calcular el IMC simplemente use las flechas de desplazamiento para ingresar la estatura medida y luego presione la tecla IMC.

- Cómoda visualización del peso al nivel de la vista
- Construcción resistente de la columna
- Calidad de construcción de fabricación en EE. UU. que puede apreciarse en todo el diseño de la báscula
- Se arma rápidamente con solo sacarla de la caja y en unos pocos pasos (no se requieren herramientas)
- 10 modelos estándares apex® diferentes a su elección



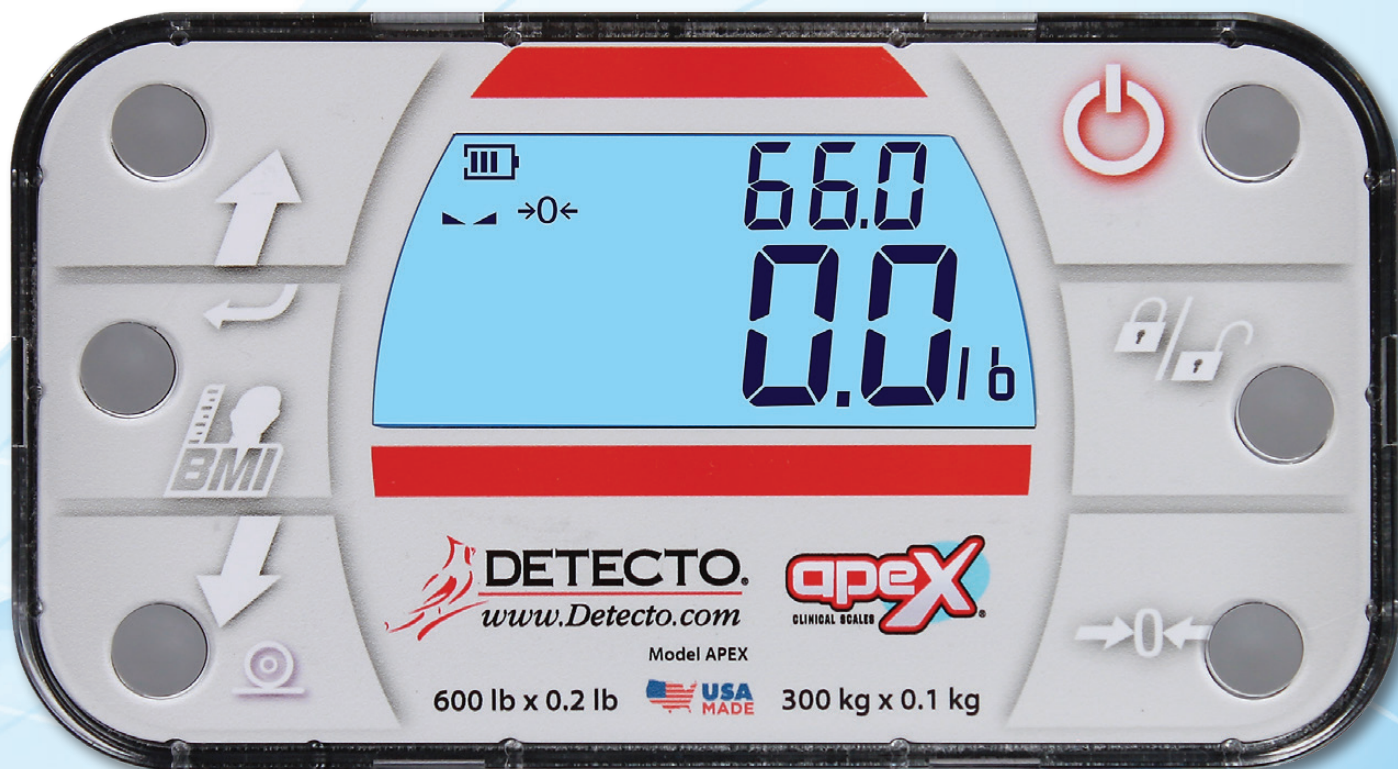


INDICADOR DE PESO DE ALTA TECNOLOGÍA

Las básculas apex® cuentan con un indicador de alta tecnología con el estilo de un teléfono inteligente (smartphone) fácil de usar con 6 botones simples y un claro visor de LCD para lecturas en gran tamaño.

- Lecturas de peso en LCD color azul clínico de 0.75 pulgadas de altura
- Cálculo del Índice de Masa Corporal
- El peso y la estatura se muestran simultáneamente en el visor
- Mantiene bloqueado automáticamente el peso durante algunos segundos para poder visualizar y registrar fácilmente la medición
- Indicación de nivel de carga de la batería

Ruedas duales integradas en todos los modelos apex® para que sea fácil de transportar.

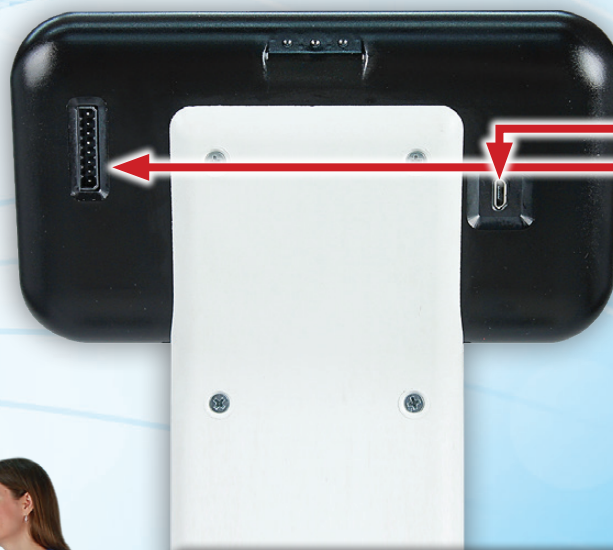

CONECTIVIDAD VERSÁTIL:

- 1 puerto micro USB-B
- 1 puerto serial RS232
- Cumple con HL7 IEEE 11073 (estándar)
- Modelos con Ethernet Wi-Fi disponibles para Registro Médico Electrónico/Registro de Salud Electrónico (EMR/ EHR) inalámbrico
- Conectividad con dispositivo Welch Allyn® disponible: CVSM, CSM, y LXI (consulte la tabla de modelos en la página de atrás)

ENERGÍA



Los modelos apex® están disponibles con un adaptador AC incluido en forma estándar (consulte los modelos en la página de atrás).

Un nivel de burbuja integrado le ayudará a localizar el área más nivelada en su piso.



La cubierta extraíble de la plataforma de las básculas apex® puede ser quitada para su limpieza o para reemplazar las 12 baterías AA.

Toda la base estructural de la báscula está fabricada en forma muy sólida para la óptima seguridad y estabilidad de los pacientes.



BÁSCULAS DIGITALES apex® CON TALLÍMETRO MECÁNICO Y VISOR A NIVEL DE LA VISTA						
Modelo		APEX	APEX-AC	APEX-WI-AC	APEX-UWA-AC	APEX-LXI-AC
Capacidad		600 libras x 0.2 libras / 300 kg x 0.1 kg				
Tallímetro		Tallímetro mecánico en línea				
Medidas del Tallímetro		24" (2') - 86" (7'2") x 0.125 in / 60 cm - 218 cm x 1 mm				
DIMENSIONES	Dimensiones Generales	17" An x 19.5" Pr x 53.3" Al / 43 cm An x 49.5 cm Pr x 135.3 cm Al				
	Tamaño de la Plataforma	17" An x 17" Pr x 2.75" Al / 43.2 cm An x 43.2 cm Pr x 7 cm Al				
	LCD	Dígitos de 0.75 in / 1.9 cm de alto en el LCD				
ENERGÍA	Baterías	12 baterías AA (no incluidas)				
	Adaptador AC (incluido)		●	●	●	●
	Puertos	1 puerto serial RS232 y 1 puerto micro USB-B				
Conectividad				Ethernet Wi-Fi	Welch Allyn CVSM/CSM	Welch Allyn LXI
Peso Neto		31 libras / 14 kg				
Peso de Envío		40 libras / 18 kg				
Dimensiones de Envío		58 in - 20 in x 6 in / 147 cm x 51 cm x 15 cm				
Código UPC		809161197808	809161197907	809161198003	809161198102	809161198201

BÁSCULAS DIGITALES apex® CON TALLÍMETRO CON SONAR Y VISOR A NIVEL DE LA VISTA						
Modelo		APEX-SH	APEX-SH-AC	APEX-SH-WI-AC	APEX-SH-UWA-AC	APEX-SH-LXI-AC
Capacidad		600 libras x 0.2 libras / 300 kg x 0.1 kg				
Tallímetro		Tallímetro sin contacto con sonar				
Medidas del Tallímetro		24" (2') - 86" (7'2") x 0.2 in / 60 cm - 218 cm x 0.5 cm				
DIMENSIONES	Dimensiones Generales	17" An x 19.5" Pr x 89.5" Al / 43 cm An x 49.5 cm Pr x 227.3 cm Al				
	Tamaño de la Plataforma	17" An x 17" Pr x 2.75" Al / 43.2 cm An x 43.2 cm Pr x 7 cm Al				
	LCD	Dígitos de 0.75 in / 1.9 cm de altura en el LCD				
ENERGÍA	Baterías	12 baterías AA (no incluidas)				
	Adaptador AC (incluido)		●	●	●	●
	Puertos	1 puerto serial RS232 y 1 puerto micro USB-B				
Conectividad				Ethernet Wi-Fi	Welch Allyn CVSM/CSM	Welch Allyn LXI
Peso Neto		32 libras / 14 kg				
Peso de Envío		41 libras / 19 kg				
Dimensiones de Envío		58" – 20" x 6" / 147 cm x 51 cm x 15 cm				
Código UPC		809161197808	809161197907	809161198003	809161198102	809161198201



DETECTO se reserva el derecho de mejorar, optimizar o modificar las características y especificaciones sin previo aviso.

VENDIDO POR:



102 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 EE. UU.
Teléfono: 417-673-4631 o 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153